

NEU



GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER

... mit den neuen Medibox® Entsorgungsbehältern




- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Große Öffnung für die Entsorgung medizinischer Instrumente
- Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
- Temporär verschließbar mit einer Hand
- Permanent endverschließbar durch Druck auf die gekennzeichneten Druckstellen auf dem Deckel der Boxen 2,4 L, 4,7 L, 5,7 L, 6,8 L und 9,1 L; Endverschluss ist hör- und fühlbar
- Permanenter Endverschluss der 0,7 Liter-Box erfolgt durch Umlappen der Lasche am Klappdeckel und Eindrücken in die vorgesehene Öffnung im Deckelboden
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
- Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907 (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

FÜR DIE ENTSORGUNG VON

1. Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz
2. Penkanülen
3. verschiedenen scharfen und spitzen medizinischen Instrumenten
4. Halterung für Schutzkappen von Penkanülen

Medibox® 0,7 L

Medibox® 2,4 L – 9,1 L

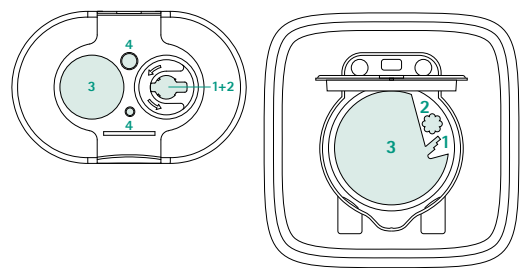

Um den Anwenderfilm zur Medibox® direkt auf Ihrem Handy anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und zur Website gelangen.

Produkt	Totales Volumen	Maximales Füllvolumen	Abmessungen (L/B/H) Deckel (L/B) Boden	Art.-Nr.	VE
Medibox® 0,7 L	0,7 Liter	0,6 Liter	11,4 x 7,4 x 13 cm 10,5 x 6,5 cm	9193405	10 Stück
Medibox® 2,4 L	2,4 Liter	2 Liter	15,1 x 15,1 x 20 cm 11 x 11 cm	9193600	27 Stück
Medibox® 4,7 L	4,7 Liter	3,9 Liter	19 x 19 x 20,5 cm 15 x 15 cm	9193618	25 Stück
Medibox® 5,7 L	5,7 Liter	4,8 Liter	19 x 19 x 25,7 cm 13,9 x 13,9 cm	9193627	25 Stück
Medibox® 6,8 L	6,8 Liter	5,7 Liter	16,7 x 16,7 x 50 cm Durchmesser 11 cm	9193639	22 Stück
Medibox® 9,1 L	9,1 Liter	7,7 Liter	21,5 x 21,5 x 32,5 cm 17 x 17 cm	9193640	13 Stück